

## Anleitung Bluetooth Pairing

# Samoa

prisma SOFT plus/max  
prisma SMART plus/max



## 1. Vorbereitung und Initialisierung Samoa

1.1




Verbinden Sie Samoa per USB Anschlusskabel mit dem PC.


1.2



Öffnen Sie die MiniScreen Viewer Software per Doppelklick auf das **MSV** Symbol auf dem Desktop.

1.3

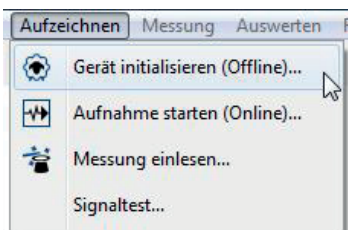


Wählen Sie unter **Aufzeichnen** > **Gerät initialisieren (Offline)** oder klicken Sie auf das Symbol  in der Menüleiste oder auf dem Dashboard.

1.4

Füllen Sie die Maske mit den Stammdaten des Patienten. Wählen Sie anschließend **Übertragung starten**.

1.5

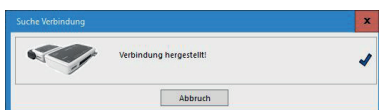

Die Verbindung zu Samoa wird aufgebaut.

1.6

Wählen Sie das Kanalsatz (Kanalsatz laden) **PG-Prisma-BT** aus.

Es besteht optional die Möglichkeit eine Verbindung zu einem ausgewählten prisma-Gerät mittels Seriennummer herzustellen.

1.7

Sie haben die Möglichkeit Samoa für einen **automatischen** (programmierten) oder **manuellen** Start zu initialisieren.

1.8

Initialisierung des Samoa abschließen.

## 2. prisma SOFT plus/max und prisma SMART plus/max mit Samoa verbinden (pairen)

2.1



Das Therapiegerät muss mit Strom verbunden sein und die Therapie ist noch nicht gestartet.

2.2



Rampentaste


Die Rampentaste am Therapiegerät solange gedrückt halten (ca. 5 Sek.) bis im Display 5r cH erscheint.

2.3



Sobald Samoa sich in der näheren Umgebung des Therapiegerätes befindet und die Samoa-Messung gestartet ist, verbinden sich die beiden Geräte miteinander. Dies wird im Display des Therapiegerätes mit PAI r angezeigt.

2.4

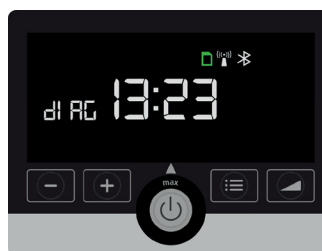

Ein erfolgreich abgeschlossener Pairing Vorgang wird im Therapiegerät mit dI RC angezeigt. Im Display des Samoa ist ein grünes Funksymbol erkennbar.

Wenn im Initialisierungsprozess des Samoa **eine** prisma-Seriennummer vergeben wurde, verbindet sich Samoa nur zu dem prisma-Gerät mit dieser Seriennummer.

Wenn im Initialisierungsprozess des Samoa **keine** prisma-Seriennummer vergeben wurde, kann das Pairing unabhängig einer Seriennummer durchgeführt werden.

### Erklärung Bezeichnungen im prisma-Display


5r cH = **Search**: Das prisma-Gerät sucht per Bluetooth das Samoa.

PAI r = **Pairing**: Das prisma-Gerät und Samoa haben sich gefunden und sind im Prozess sich zu verbinden.

dI RC = **Diagnose**: Das prisma-Gerät und Samoa sind verbunden und befinden sich im Datenaustausch.

### Erklärung Funksymbole im Samoa-Display

- Bluetooth Modul wird initialisiert.
- Samoa findet mehr als ein prisma-Gerät.
- Samoa sucht nach Verbindung zum prisma-Gerät.
- Bluetooth-Verbindung zum prisma-Gerät hergestellt.

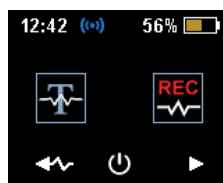

Dr. Fenyves und Gut Deutschland  
Daimlerstraße 23  
72414 Rangendingen, Deutschland



**Vertrieb + Service**  
Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80  
56130 Bad Ems, Deutschland  
T. +49 2603 9600-0  
F. +49 2603 9600-50  
info@loewensteinmedical.com  
loewensteinmedical.com

